



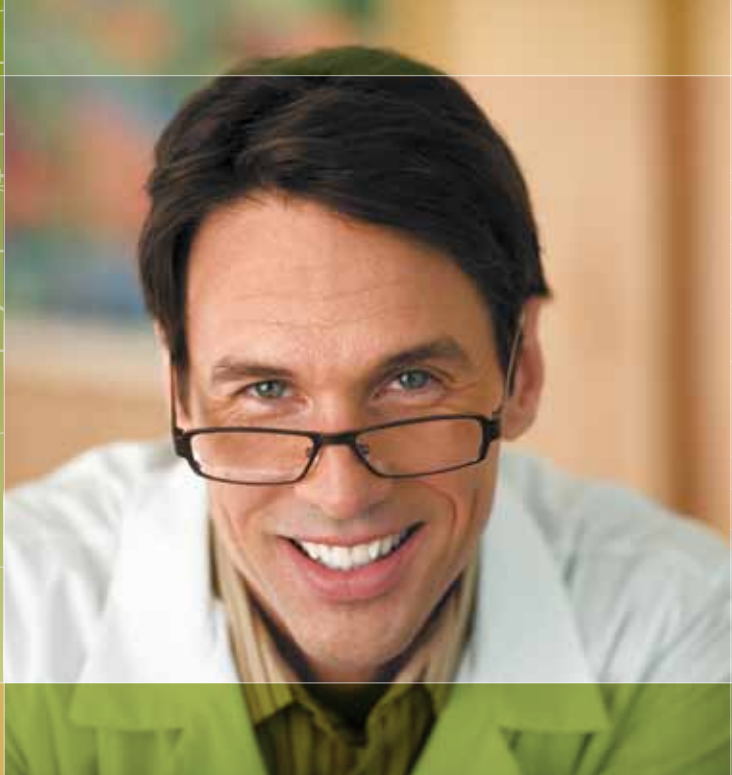

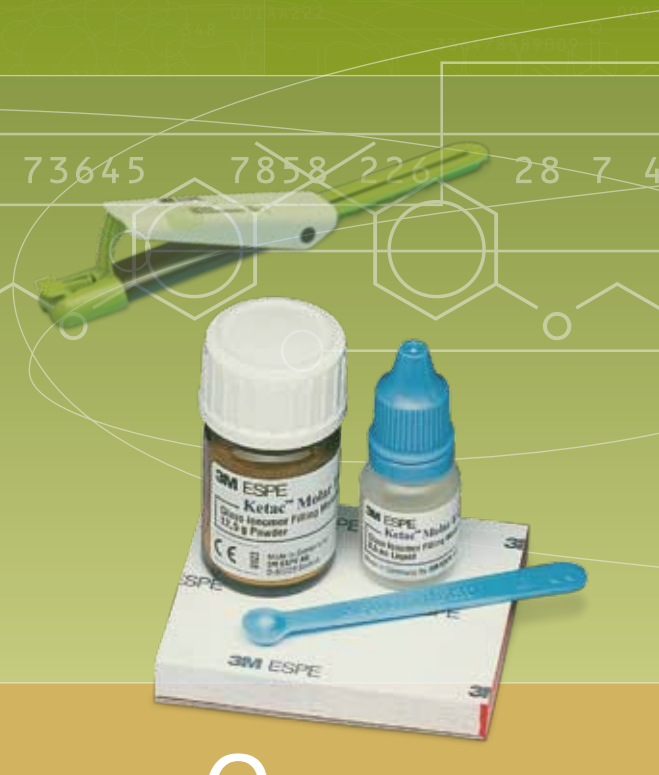

Стеклоиономерные пломбировочные материалы

Гибридный пломбировочный цемент Vitremer™	10
Традиционный стеклоиономерный Ketac™ Molar Easymix	11
Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™	12

Пломбировочные материалы

Показания	Класс I	Класс II	Класс III	Класс IV	Класс V	Лайнерная прокладка	Герметизация фиссур	Лечение молочных зубов	Временное пломбирование	Надстройка культи	Непрямые вкладки, накладки, виниры

Композитные реставрационные материалы

Filtek™ Ultimate Высокоэстетический универсальный нанокомпозит	●	●	●	●	●					●	●
Filtek™ Z550 Универсальный композит	●	●	●	●	●					●	●
Filtek™ Z250 Универсальный композит	●	●	●	●	●					●	●
Valux™ Plus Универсальный композит	●	●	●	●	●					●	
Filtek™ Ultimate Flowable Жидкотекучий нанокомпозит					❶	●	●		❺		
Filtek™ P60 Пакуемый композит	●	●								●	
Filtek™ Silorane Низкоусадочный композит	●	●									

Стеклоиономерные реставрационные материалы

Ketac™ Molar Easymix Стеклоиономерный пломбировочный материал	❷	❸	❹		●	●	●	●	●	●	
--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--

Гибридные стеклоиономерные реставрационные материалы

Vitremer™ Гибридный стеклоиономер	❸	❸	●		●	●		●	●	●	
Vitrebond™ Гибридный стеклоиономер						●					

- ❶ Небольшие дефекты
- ❷ Области вне окклюзии
- ❸ Условно постоянное лечение
- ❹ Методика ART (атравматическая реставрация)
- ❺ Починка конструкций из гибридных и акрилатных временных материалов

Vitremer™

Стеклоиономерный пломбировочный материал

Гибридный стеклоиономерный цемент тройного отверждения

Назначение:

- Пломбирование полостей I и II класса
- Пломбирование полостей III и V класса
- Лечение пожилых пациентов и пациентов с низким гигиеническим индексом
- Лечение при некариозных поражениях зубов
- Пломбирование при кариесе корня
- Пломбирование молочных зубов
- Надстройка культи
- Построение основы при сэндвич-технике
- Закрытие перфорационных дефектов
- Санация под наркозом

Преимущества:

- Патентованный тройной механизм полимеризации:
 - фотополимеризация
 - химическая полимеризация
 - стеклоиономерная реакция
- Возможность вносить материал большими порциями (особенно актуально при реставрации депульпированных зубов)
- Активное выделение фтора
- Отличное краевое прилегание
- Прочная химическая связь с патологически изменённым дентином
- Возможность вносить материал в полость с помощью пистолета - диспенсера
- Возможность приступать к обработке реставрации сразу после фотополимеризации
- Пакуемость
- 9 различных оттенков
- Упаковость, сходная с натуральным дентином
- Специальные оттенки для ортопедии и детской стоматологии
- Нулевая растворимость

Инструкция по использованию:


- Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
- Дозируйте 1 капля : 1 ложка
- Замешивайте 45 сек
- Рабочее время (включая время смешивания) 3:00 мин
- Фотополимеризуйте 40 сек
- При использовании в качестве самостоятельного пломбировочного материала нанесите слой финишного лака и фотополимеризуйте 20 сек



Стеклоиономерный пломбировочный материал Vitremer™
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
3303I	Ознакомительный набор 6 флаконов с порошком (5 г) оттенки: A3, A4, C2, C4, Pedo, Blue, 1 флакон с праймером (6,5 мл), 2 флакона с жидкостью (8 мл), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (6,5 мл), 60 одноразовых кисточек, 1 держатель для кисточки 50 наконечников/поршней для внесения материала, 1 блокнот для замешивания (7,5 x 13 см), 1 поддончик для до- зирования, 1 ложка для дозирования
3303MPA3	Малый набор A3 1 флакон с порошком (5 г), оттенок A3, 1 флакон с жидкостью (2,5 мл), 1 флакон с праймером (2 мл), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (2 мл), 1 ложка для дозирования, 1 блокнот для замешивания
3303 MPBlue	Малый набор Blue 1 флакон с порошком (5 г), оттенок Blue (core build-ups), 1 флакон с жидкостью (2,5 мл), 1 флакон с праймером (2 мл), 1 флакон с лаком для окончательной обработки (2 мл), 1 ложка для дозирования, 1 блокнот для замешивания
	Рефилы
3303A3	1 флакон с порошком (9 г), оттенок A3, 1 ложка для дозирования
3303A3.5	1 флакон с порошком (9 г), оттенок A3.5, 1 ложка для дозирования
3303A4	1 флакон с порошком (9 г), оттенок A4, 1 ложка для дозирования
3303B2	1 флакон с порошком (9 г), оттенок B2, 1 ложка для дозирования
3303B3	1 флакон с порошком (9 г), оттенок B3, 1 ложка для дозирования
3303C2	1 флакон с порошком (9 г), оттенок C2, 1 ложка для дозирования
3303C4	1 флакон с порошком (9 г), оттенок C4, 1 ложка для дозирования
3303Pedo	1 флакон с порошком (9 г), оттенок Pedo, 1 ложка для дозирования
3303Blue	1 флакон с порошком (9 г), оттенок Blue (голубой), 1 ложка для дозирования
3303P	1 флакон с праймером (6,5 мл)
3303L	1 флакон с жидкостью (8 мл)
3303FG	1 флакон с лаком для окончательной обработки (6,5 мл)

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ P60,
Valux™ Plus, прокладочный материал Vitrebond™

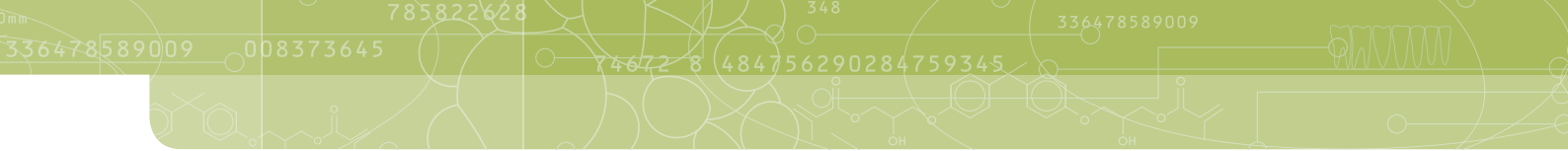

Ketac™ Molar Easymix

Стеклоиономерный пломбировочный материал облегченного смешивания

Традиционный стеклоиономерный цемент в гранулах

Назначение:

- ART-методика
- Пломбирование временных зубов (все классы)
- Герметизация фиссур
- Пломбирование всех классов полостей у детей с незавершенной минерализацией
- Надстройка культи
- Пломбирование при кариесе корня
- Небольшие пломбы вне окклюзии (I, III класс)
- Полости V класса, когда не требуется эстетика
- Условно постоянные пломбы

Преимущества:

- Активное выделение фтора
- Более быстрое и легкое замешивание благодаря гранулированной форме порошка
- Более точное и аккуратное дозирование
- Отсутствие пыли при замешивании
- Рентгеноконтрастный
- Хорошее краевое прилегание
- Прочная химическая связь с патологически измененным дентином
- Пакуемость

Инструкция по использованию:

- Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
- Дозируйте 1 капля:1 ложка
- Замешивайте 30 сек
- Рабочее время (включая время смешивания) 3:00 мин
- Время затвердевания (от начала смешивания) 5:00 мин



Стеклоиономерный пломбировочный материал Ketac™ Molar Easymix
Пробный набор

Артикул	Комплектация
56632	Пробный набор 1 флакон с порошком (12,5 г), оттенок А3, 1 флакон с жидкостью (8,5 мл), 1 флакон с кондиционером, 1 флакон с лаком, 1 блокнот для замешивания, 1 ложечка для дозирования
56633	Пробный набор для ART методики 1 флакон с порошком (12,5 г), оттенок А3, 1 флакон с жидкостью (8,5 мл), 1 блокнот для замешивания, 1 ложечка для дозирования

Vitrebond™

Стеклоиономерный прокладочный материал светового отверждения

Назначение:

- Наложение лайнерной прокладки при среднем кариесе у пациентов с проблемной полостью рта
- Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу в кариозную полость с высоким С-фактором
- Наложение изолирующей прокладки при глубоком кариесе для предупреждения разрушения лечебного прокладочного материала компонентами адгезивной системы
- Наложение лайнерной прокладки под композитную пломбу, если врач планирует закончить лечение зуба в одно посещение

Преимущества:

- Двойной механизм полимеризации:
 - фотополимеризация
 - стеклоиономерная реакция
- Активное пролонгированное выделение фтора
- Отличное краевое прилегание
- Прочная химическая связь с дентином (в т.ч. патологически изменённым)
- Высокая биосовместимость
- Рентгеноконтрастность
- Материал сразу после фотополимеризации можно протравливать ортофосфорной кислотой


Инструкция по использованию:

- Перед дозированием встряхните ёмкость с порошком
- Дозируйте 1 капля :1 ложка (допустимо 2:1 или 1:2)
- Замешивайте 15 сек
- Рабочее время 3 мин (включая время смешивания)
- Полимеризуйте 30 сек



Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
7510	Ознакомительный набор 1 флакон с порошком (9 г), 1 флакон с жидкостью (5,5 мл), 2 блокнота для замешивания (7,5x8 см), 1 ложка для дозирования
7510MP	Малый набор 1 флакон с порошком (4,5 г), 1 флакон с жидкостью (2,75 мл), 1 блокнот для замешивания (7,5x8 см) 1 ложка для дозирования
Рефилы	
7512P	1 флакон с порошком (9 г)
7512L	1 флакон с жидкостью (5,5 мл)

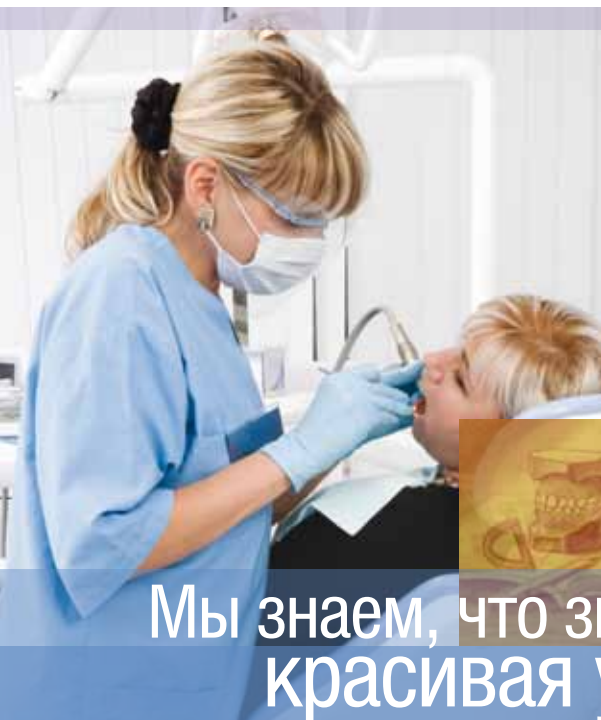

Мы знаем, что значит красивая улыбка для Вас и Ваших пациентов



CLARITY™ | SL
Самолигирующаяся система брекетов

MBT™
M c L A U G H L I N
B E N N E T T
T R E V I S I



Компания 3M Unitek вот уже более 60 лет занимает лидирующие позиции на мировом рынке ортодонтического оборудования. Такого успеха нам удалось добиться благодаря использованию инновационных технологий и высококачественных материалов в процессе создания новых продуктов. Тысячи ортодонт по всему миру доверяют таким торговым маркам, как:

- **Incognito™** — лингвальные брекеты, изготовленные индивидуально
- **Clarity™** — керамические брекеты с запатентованным металлическим пазом
- **Clarity™ ADVANCED** — керамические брекеты с непревзойденной эстетикой
- **Transbond™** — адгезивы с несравненным качеством фиксации
- **APC™** — запатентованная система с предварительно нанесенным адгезивом, которая заботится о Вашем времени и гигиене пациента



Transbond™ Plus
Color Change



CLARITY™ | ADVANCED
Новое поколение керамических брекетов



Композитные реставрационные материалы

Универсальный реставрационный материал Filtek™ Ultimate	15
Жидкотекущий композит Filtek™ Ultimate Flowable.....	17
Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z550.....	18
Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z250.....	19
Универсальный реставрационный материал Valux™ Plus	20
Реставрационный материал для боковой группы зубов Filtek™ Silorane	21
Реставрационный материал для боковой группы зубов Filtek™ P60.....	22
Материалы для финишной обработки Sof-Lex™	24

Filtek™ Ultimate

Универсальный реставрационный материал

Высокоэстетичный универсальный нанокompозит, обладающий отличными рабочими характеристиками. Оптимизированная цветовая шкала и легко читаемая упаковка для максимального удобства доктора

Назначение:

- Прямое восстановление зубов фронтальной группы, премоляров и моляров (в т.ч. и для пломбирования окклюзионных поверхностей)
- Эстетическая реставрация фронтальных и жевательных зубов
- Изготовление вкладок и накладок
- Надстройка культи
- Прямые и лабораторные виниры
- Шинирование
- Сэндвич-техника

Преимущества:

Просто использовать

- Отличные манипуляционные свойства
- Больше оттенков Body – больше возможностей делать эстетичные реставрации, используя один оттенок
- Легко читаемая упаковка

Естественная эстетика

- Отличная полируемость
- Большое разнообразие оттенков и прозрачностей
- Улучшенная флюоресценция

Уникальная нанотехнология

- Стойкость блеска лучше, чем у микрофила
- Отличная износостойчивость
- Возможность использования для реставрации фронтальных и боковых зубов

Инструкция по использованию:

- До начала лечения при естественном освещении определите основной оттенок зуба по шкале VITAPAN Classic
- Выберите одно-, дву- или многослойную методику восстановления и для правильного подбора оттенков воспользуйтесь шкалой-селектором
- Подготовьте полость к применению композитного материала
- Вносите и полимеризуйте слои материала в соответствии с таблицей



Универсальный реставрационный материал Filtek™ Ultimate
Профессиональный набор

Оттенки	Толщина слоя	Время полимеризации
Основной	2.0 мм	20 с
Эмалевый	2.0 мм	20 с
Прозрачный	2.0 мм	20 с
Дентинный	1.5 мм	40 с

Однослойную, но тем не менее высокоэстетическую, реставрацию возможно выполнить, применяя лишь основные оттенки материала (Body)

Артикул	Комплектация
3920S	Ознакомительный набор Single shade Набор для реставрации оттенками одной прозрачности 4 шприца (4г): по 2 шприца Body оттенки A2, A3
3920D	Ознакомительный набор Dual shade Набор для реставрации оттенками двух прозрачностей 4 шприца (4г): по 1 шприцу Dentin оттенки A3, A4 Enamel оттенки A2, A3
3920P	Профессиональный набор 12 шприцев (4г): по 1 шприцу Dentin оттенки A2, A3, B3 Body оттенки A2, A3, A3.5, B2 Enamel оттенки A1, A2, A3, V Translucent оттенок Amber (TA)(AT) Шкала подбора оттенков

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One
Adper™ Single Bond 2
Adper™ Prompt™ L-Pop™

Жидкотекучий композит Filtek™
Ultimate Flowable
Система финишной обработки
Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный
материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Артикул	Комплектация
	Рефилы
	Дентиновые оттенки
3920A1D	1 шприц (4г) оттенок A1D
3920A2D	1 шприц (4г) оттенок A2D
3920A3D	1 шприц (4г) оттенок A3D
3920A4D	1 шприц (4г) оттенок A4D
3920B3D	1 шприц (4г) оттенок B3D
3920C4D	1 шприц (4г) оттенок C4D
3920WD	1 шприц (4г) оттенок WD (белый)
	Основные оттенки (универсальные)
3920A1B	1 шприц (4г) оттенок A1B
3920A2B	1 шприц (4г) оттенок A2B
3920A3B	1 шприц (4г) оттенок A3B
3920A3,5B	1 шприц (4г) оттенок A3,5B
3920A4B	1 шприц (4г) оттенок A4B
3920A6B	1 шприц (4г) оттенок A6B
3920B1B	1 шприц (4г) оттенок B1B
3920B2B	1 шприц (4г) оттенок B2B
3920B3B	1 шприц (4г) оттенок B3B
3920B5B	1 шприц (4г) оттенок B5B
3920C1B	1 шприц (4г) оттенок C1B
3920C2B	1 шприц (4г) оттенок C2B
3920C3B	1 шприц (4г) оттенок C3B
3920D2B	1 шприц (4г) оттенок D2B
3920D3B	1 шприц (4г) оттенок D3B
3920WB	1 шприц (4г) оттенок WB (белый)
3920XWB	1 шприц (4г) оттенок XWB (белый)

Артикул	Комплектация
	Эмалевые оттенки
3920A1E	1 шприц (4г) оттенок A1E
3920A2E	1 шприц (4г) оттенок A2E
3920A3E	1 шприц (4г) оттенок A3E
3920B1E	1 шприц (4г) оттенок B1E
3920B2E	1 шприц (4г) оттенок B2E
3920D2E	1 шприц (4г) оттенок D2E
3920WE	1 шприц (4г) оттенок WE (белый)
3920XWE	1 шприц (4г) оттенок XWE (белый)
	Прозрачные оттенки
3920CT	1 шприц (4г) оттенок CT (прозрачный)
3920BT	1 шприц (4г) оттенок BT (голубой)
3920GT	1 шприц (4г) оттенок GT (серый)
3920AT	1 шприц (4г) оттенок AT (янтарный)

Сопутствующие продукты: Композит Filtek™ Ultimate Жидкотекучий

Filtek™ Ultimate Flowable

Жидкотекучий композитный материал

Нанонаполненный жидкотекучий композитный материал

Назначение:

- Реставрация небольших полостей
- Пломбирование пришеечных дефектов
- Герметизация фиссур
- Туннельная техника
- Ремонт небольших дефектов в композитных реставрациях
- Создание суперадаптивного лайнерного слоя под прямые композитные реставрации
- Блокирование поднугрений
- Починка акриловых и композитных временных материалов

Преимущества:

- Улучшенная эстетика
- Улучшенная полируемость и стойкость блеска
- Флюоресценция
- Низкая полимеризационная усадка
- Отличная износостойчивость
- Не липнет к инструментам
- Не вытекает из полости
- Легко читаемая этикетка

Инструкция по использованию:

- Вносите материал послойно
- Не создавайте слои толще 2 мм
- Полимеризуйте каждый слой отдельно по 20 сек*

*Время полимеризации оттенка ОА3 – 40 сек



Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable
Рефил

Артикул	Комплектация
3930A1	2 шприца (по 2 г), оттенок А1 20 канюль-аппликаторов
3930A2	2 шприца (по 2 г), оттенок А2 20 канюль-аппликаторов
3930A3	2 шприца (по 2 г), оттенок А3 20 канюль-аппликаторов
3930A3.5	2 шприца (по 2 г), оттенок А3.5 20 канюль-аппликаторов
3930A4	2 шприца (по 2 г), оттенок А4 20 канюль-аппликаторов
3930B1	1 шприц (2 г), оттенок В1 20 канюль-аппликаторов
3930B2	1 шприц (2 г), оттенок В2 20 канюль-аппликаторов
3930C2	1 шприц (2 г), оттенок С2 20 канюль-аппликаторов
3930D2	1 шприц (2 г), оттенок D2 20 канюль-аппликаторов
3930W	1 шприц (2 г), оттенок W 20 канюль-аппликаторов
3930XW	1 шприц (2 г), оттенок XW 20 канюль-аппликаторов
3930OA3	1 шприц (2 г), оттенок ОА3 20 канюль-аппликаторов

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ P60, Valux™ Plus
Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Sigle Bond 2, Adper™ Prompt™ L-Pop™

Система финишной обработки Sof-Lex™
Материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4

Filtek™ Z550

НОВИНКА!

Универсальный наногибридный реставрационный материал

При создании нового универсального наногибридного материала Filtek™ Z550 мы взяли за основу уже зарекомендовавший себя композитный материал Filtek™ Z250 и добавили уникальную технологию нанонаполнителя. Это позволило значительно улучшить манипуляционные свойства нового композита, его прочностные, а также эстетические характеристики. Материал Filtek™ Z550 идеально подходит для ежедневного использования в стоматологической практике.

Назначение:

- Прямая реставрация фронтальных и жевательных зубов, включая окклюзионную поверхность
- Надстройка культи
- Шинирование
- Непрямая реставрация зубов, включая вкладки, накладки и виниры

Преимущества:

- Отличные манипуляционные свойства
- Не липнет к инструментам
- Очень легко адаптируется к стенкам полости
- Легко моделируется вне зависимости от дизайна реставрации
- Держит форму до полимеризации
- Предсказуемая эстетика
- Высокая прочность
- Хорошая износостойкость
- Легко полируется
- Хорошая сохранность блеска
- 12 самых наиболее используемых оттенков

Инструкция по использованию:

- Определите основной оттенок зуба в соответствии с классической шкалой Vita®
- Подготовьте полость к применению композитного материала
- Вносите и полимеризуйте материал в соответствии с таблицей

Оттенки	Глубина слоя	Время полимеризации	
		Минимальная интенсивность света 400 мВт/см²	Минимальная интенсивность света 1000 мВт/см²
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3	2,0 мм	20 сек	10 сек
0A2, 0A3	1,5 мм	20 сек	10 сек



Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z550
Ознакомительный набор

Информация для заказа:

Артикул	Комплектация
7050IK	Ознакомительный набор 8 шприцев (по 4 г): A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, 0A2 1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6мл) 1 шприц с протравочным гелем Scotchbond (3 мл) 25 наконечников-аппликаторов для дозатора с протравочным гелем 25 одноразовых кисточек 1 держатель для кисточки 1 поддончик для адгезива
Рефилы	
7050A1	1 шприц (4 г), оттенок A1
7050A2	1 шприц (4 г), оттенок A2
7050A3	1 шприц (4 г), оттенок A3
7050A3,5	1 шприц (4 г), оттенок A3.5
7050A4	1 шприц (4 г), оттенок A4
7050B1	1 шприц (4 г), оттенок B1
7050B2	1 шприц (4 г), оттенок B2
7050B3	1 шприц (4 г), оттенок B3
7050C2	1 шприц (4 г), оттенок C2
7050D3	1 шприц (4 г), оттенок D3
70500A2	1 шприц (4 г), оттенок 0A2
70500A3	1 шприц (4 г), оттенок 0A3



Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Single Bond 2, Adper™ Prompt™ L-Pop™,

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable
Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™
Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Filtek™ Z250

Универсальный реставрационный материал



Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения

Назначение:

- Прямая и непрямая реставрация I-V класса во фронтальных и жевательных зубах
- Вкладки, накладки, виниры
- Сэндвич-техника
- Надстройка культи
- Шинирование

Преимущества:

- Возможность выполнения многослойных реставраций
- Высокая прочность
- Эффект хамелеона
- Высокая износостойчивость
- Низкая усадка
- Восстановление как фронтальных, так и жевательных зубов
- Не липнет к инструментам
- Сочетается с другими композитами

Инструкция по использованию:

- Выберите оттенок в соответствии с цветовой шкалой материала
- Подготовьте полость к применению композитного материала
- Вносите и полимеризуйте материал в соответствии с таблицей

Оттенки	Толщина слоя	Время полимеризации
A1, A2, A3	2.5 mm	20 сек
A3.5, A4, B1	2.5 mm	20 сек
B2, B3, C2	2.5 mm	20 сек
D3 и I	2.5 mm	20 сек
UD	2.0 mm	30 сек



Универсальный реставрационный материал Filtek™ Z250
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
6020E	Ознакомительный набор 8 шприцев (по 4 г): A1, A2, A3, A3.5, B3, C2, D3, UD, 1 флакон с адгезивом Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 1 шприц с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл), 25 наконечников, 1 пробный набор дисков/шприц Sof-Lex™, 1 блокнот для замешивания, 2 держателя для кисточки, 25 кисточек 48 ячеек для дозирования, 1 шкала оттенков
Рефилы	
6020A1	1 шприц (4 г), оттенок A1
6020A2	1 шприц (4 г), оттенок A2
6020A3	1 шприц (4 г), оттенок A3
6020A3.5	1 шприц (4 г), оттенок A3.5
6020A4	1 шприц (4 г), оттенок A4
6020B1	1 шприц (4 г), оттенок B1
6020B2	1 шприц (4 г), оттенок B2
6020B3	1 шприц (4 г), оттенок B3
6020C2	1 шприц (4 г), оттенок C2
6020D3	1 шприц (4 г), оттенок D3
6020I	1 шприц (4 г), оттенок I
6020UD	1 шприц (4 г), оттенок UD

*Журнал The Dental Advisor удостоил Filtek™ Z250 звания «Лучший продукт» в 2003г. в категории «Микрогибрид» (Vol. 21, No.1, January 2004).

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Single Bond 2, Adper™ Prompt™ L-Pop™,

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™ Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Valux™ Plus

Универсальный пломбировочный материал

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный микрогибридный композитный пломбировочный материал

Назначение:

- Восстановление фронтальных и жевательных зубов
- Сэндвич-техника
- Надстройка культи

Преимущества:

- Высокая прочность и износостойчивость
- Пластичность
- Не липнет к инструментам
- Хорошо держит форму
- 8 оттенков

Инструкция по использованию:

- Вносите материал послойно. Не создавайте слои толще 2,5 мм (2,0 мм для оттенка UD)
- Полимеризуйте каждый слой в течение 40 сек



Универсальный пломбировочный материал Valux™ Plus
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
5540SB	Ознакомительный набор 9 Шприцев (по 4г): 2хA2, 2хA3, 1хA1, 1хA3.5, 1хB3, 1хC2, 1хUD 1 Флакон (6 мл) адгезива Adper™ Single Bond 2 2 шприца (3 мл) протравка Scotchbond™ 25 наконечников для шприцев 2 кисточкодержателя 1 поддончик для адгезива 60 кисточек-насадок 1 блокнот для смешивания 1 пробный набор дисков Sof-Lex™ 1 шкала оттенков
	Рефилы
5540A1	1 шприц (4 г), оттенок A1
5540A2	1 шприц (4 г), оттенок A2
5540A3	1 шприц (4 г), оттенок A3
5540A3.5	1 шприц (4 г), оттенок A3.5
5540B2	1 шприц (4 г), оттенок B2
5540B3	1 шприц (4 г), оттенок B3
5540C2	1 шприц (4 г), оттенок C2
5540UD	1 шприц (4 г), универсальный дентин (опак): UD

Сопутствующие продукты: Адгезивы Adper™ Easy One, Adper™ Single Bond 2, Adper™ Prompt™ L-Pop™,

Жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable Система финишной обработки Sof-Lex™

Стеклоиономерный прокладочный материал Vitrebond™ Гибридный стеклоиономер Vitremer™

Создан

для Вашего удобства



При создании нового универсального наногибридного материала 3M™ ESPE™ Filtek™ Z550 мы взяли за основу уже зарекомендовавший себя композитный материал Filtek™ Z250 и добавили уникальную технологию нанонаполнителя. Это позволило значительно улучшить манипуляционные свойства нового композита, его прочностные, а также эстетические характеристики. Материал Filtek™ Z550 идеально подходит для ежедневного использования в стоматологической практике.

- Отличные манипуляционные свойства
- Предсказуемая эстетика
- Высокая прочность
- Высокая износостойчивость
- Хорошая полируемость и сохранность блеска
- 12 самых ходовых оттенков

Более подробно о новом наногибридном композите Filtek™ Z550 Вы можете узнать на www.3mespe.ru



Filtek™ Z550

Универсальный наногибридный композитный материал

Материалы для финишной обработки

Sof-Lex™

Диски и штрипсы для шлифования и полирования

Комплексная система для шлифования и полирования всех видов реставраций

Назначение:

- Шлифование и полирование пломб, а также ортопедических конструкций из пластмасс, металлов, керамики и др.
- Диски – для обработки вестибулярных и язычных поверхностей
- Штрипсы – для обработки интерпроксимальных поверхностей

Преимущества:

Диски:

- Гибкие
- 4 степени абразивности – от грубой до супермягкой
- 2 толщины основы – нормальная и экстра тонкая
- Степень абразивности дифференцируется по цвету
- Диски прочно фиксируются на держателе и легко снимаются

Штрипсы:

- Тонкие на гибкой основе
- Идеальны для интерпроксимальных поверхностей
- Сочетают 2 степени абразивности в одной полоске:
 - Мягкие / супермягкие
 - Грубые / средние
 - Грубые / средние (узкие)

Инструкция по использованию:

Для более качественной обработки поверхности при работе с дисками используйте последовательно все степени абразивности от грубой до супертонкой



Диски для шлифования и полирования Sof-Lex™
Ознакомительный набор

Степень абразивности			
Супермягкие (1–7 µm)	Мягкие (3–9 µm)	Средние (10–40 µm)	Грубые (50–90 µm)
Sof-Lex™ стандартные диски			
8691SF	8691F	8691M	8691C
8690SF	8690F	8690M	8690C
Sof-Lex™ сверхтонкие жесткие диски			
8692SF	8692F	8692M	8692C
8693SF	8693F	8693M	8693C
Sof-Lex™ штрипсы			
SF F		M C	
1956		1954	
		1954N	

Sof-Lex™

Диски и штрипсы для шлифования и полирования

Артикул	Комплектация	Артикул	Комплектация
1980	Ознакомительный набор 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 9.5 мм 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 12.7 мм 1 дискодержатель для углового наконечника	2385P	Полный набор 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 9.5 мм 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 12.7 мм 120 дисков на гибкой и тонкой основе (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 9,5 мм 120 дисков на гибкой и тонкой основе (ХТ): супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 12.7 мм 1 дискодержатель для углового наконечника 15 штрипс, грубые / средние 15 штрипс, грубые / средние (узкие) 15 штрипс, мягкие / супермягкие
	Рефилы ø 9.5 мм		Рефилы
8690SF	50 дисков: супермягкие, ø 9.5 мм	1954	150 штрипсов, грубые / средние
8690F	50 дисков: мягкие, ø 9.5 мм	1954N	100 штрипсов, грубые / средние (узкие)
8690M	50 дисков: средние, ø 9.5 мм	1956	120 штрипсов, мягкие / супермягкие
8690C	Диски: грубые, ø 9.5 мм	8695CA	2 дискодержателя для углового наконечника
	Рефилы ø 12.7 мм		
8691SF	50 дисков: супермягкие, ø 12.7 мм		
8691F	50 дисков: мягкие, ø 12.7 мм		
8691M	50 дисков: средние, ø 12.7 мм		
8691C	50 дисков: грубые, ø 12.7 мм		
2380	Ознакомительный набор Диски на гибкой и тонкой основе (ХТ) 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 9.5 мм 120 дисков: супермягкие, мягкие, средние, грубые (по 30 шт) ø 12.7 мм 1 Дискодержатель для углового наконечника		
	Рефилы ø 9.5 мм		
8693SF	50 дисков: супермягкие, ø 9.5 мм		
8693F	50 дисков: мягкие, ø 9.5 мм		
8693M	50 дисков: средние, ø 9.5 мм		
8693C	50 дисков: грубые, ø 9.5 мм		
	Рефилы ø 12.7 мм		
8692SF	50 дисков: супермягкие, ø 12.7 мм		
8692F	50 дисков: мягкие, ø 12.7 мм		
8692M	50 дисков: средние, ø 12.7 мм		
8692C	50 дисков: грубые, ø 12.7 мм		

Adper™ Single Bond 2

Адгезив стоматологический

Нанонаполненный адгезив V-ого поколения

Назначение:

- Прямые светоотверждаемые реставрации из композита и компомера
- Бондинг керамических виниров
- Непрямые реставрации из металла, керамики или композита в сочетании с композитным адгезивным цементом 3M™ ESPE™ RelyX™ ARC
- Снятие чувствительности при оголении корней зубов
- Коррекция и починка керамики, металлокерамики и композитных реставраций

Преимущества:

- Нет необходимости встряхивать флакон перед использованием
- Нанонаполнитель создает плотную непроницаемую адгезивную пленку
- Высокая адгезия к эмали и дентину
- Удобная форма флакона позволяет легко его открывать и извлекать жидкость
- Консистенция жидкости стабильна и постоянна благодаря нанонаполнителю


Инструкция по использованию:

- Нанесите протравочный гель Scotchbond™ на эмаль на 30 сек, на дентин на 15 сек, смойте водой и просушите полость ватным шариком или мини-губкой
- Нанесите последовательно 2 слоя адгезива Adper™ Single Bond 2 на 15 сек
- Просушите легкой воздушной струей в течение 5 сек
- Полимеризуйте в течение 10 сек
- Полимеризуйте адгезив из расчета 10 сек на каждую поверхность нанесения адгезива



Адгезив стоматологический Adper™ Single Bond 2
Рефил

Артикул	Комплектация
51201	Ознакомительный набор 1 адгезив (6 г), 2 шприца с протравочным гелем Scotchbond™ (3 мл), 25 насадок-аппликаторов для шприца с протравочным гелем Scotchbond™, 48 одноразовых емкостей для смешивания, 60 одноразовых кисточек, 1 держатель для кисточки
	Рефил
51202	1 адгезив (6 г)

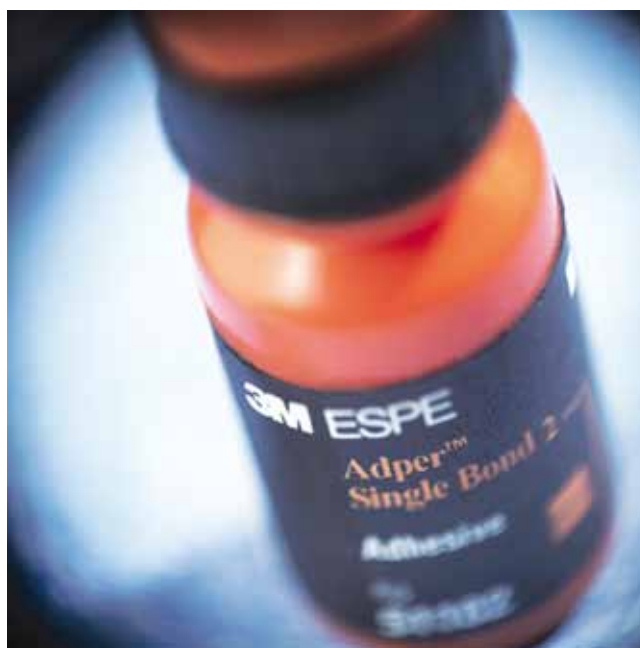

Сопутствующие продукты: Композиты Filtek™ Ultimate, Filtek™ Z550, Filtek™ Z250, Filtek™ P60, Valux™ Plus, жидкотекучий композит Filtek™ Ultimate Flowable

Цемент для фиксации RelyX™ ARC
Керамический праймер RelyX™

Ассортимент оттисковых масс

Название	Express™	Express™ XT Putty Soft	Express™ XT Penta™ Putty	Express™ XT Light Body	Express™ XT Light Body Quick	Express™ XT Regular Body	Express™ Ultra Light Body	Impregum™ Penta™ Soft	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™	Impregum™ Garant™ DuoSoft™
Базовая/корригирующая оттисковая масса	Базовая	Базовая	Базовая	Корригирующая	Корригирующая	Корригирующая	Корригирующая	Базовая / Корригирующая	Базовая	Корригирующая
Тип оттисковой массы	α-силикон	α-силикон	α-силикон	α-силикон	α-силикон	α-силикон	α-силикон	полиэфир	полиэфир	полиэфир
Цвет										
Вязкость	высокая	высокая	высокая	низкая	низкая	средняя	очень низкая	низкая	низкая	низкая
Время затвердевания (23°)	обычное	обычное	обычное	обычное	укороченное	обычное	укороченное	обычное	обычное	обычное
Рабочее время от начала смешивания (23°) мин:сек	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:00	01:30	02:45	02:30	03:15
время затвердевания в полости рта	05:00	03:30	03:00	3:30/3:00*	02:30	3:30/3:00*	02:30	03:15	03:30	03:15
Тип смешивания	ручное	ручное	автоматич. в системе Pentamix (5:1)	автоматич. в системе Garant (2:1)	автоматич. в системе Garant (2:1)	автоматич. в системе Garant (2:1)	автоматич. в системе Garant (2:1)	автоматич. в системе Pentamix (5:1)	автоматич. в системе Pentamix (5:1)	автоматич. в системе Garant (2:1)
Показания										
Диагностические и вспомогательные оттиски	++	++								
Оттиски при несъемном протезировании:										
Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Вкладки inlay/onlay/overlay	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Штифтовые культевые вкладки	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Виниры	-	-	+	+	+	+	+	++	++	++
Оттиски при съемном и частично съемном протезировании:										
Полное съемное протезирование	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Бюгельное протезирование	+	+	+	+	+	+	+	++	++	++
Функциональные оттиски при адентии	-	-	-	-	-	-	-	++	++	++
Оттиски при протезировании на имплантатах										
Силиконовый ключ	++	++								

* в комбинации с массой Express™ XT Penta™ Putty:

Базовая масса Express™ XT Penta™ Putty нагревается в процессе замешивания в аппарате Pentamix™ до температуры 36°C, что ускоряет время затвердевания корригирующих материалов при одноэтапной технике снятия оттиска.

Impregum™ Penta™ Soft

Полиэфирный монофазный оттискной материал

Полиэфирный монофазный оттискной материал
для замешивания в аппарате Pentamix™

Назначение:

- непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- вкладки inlay/onlay/overlay
- штифтовые культевые вкладки
- виниры
- полное съемное протезирование
- бюгельное протезирование
- функциональные оттиски при адентии

Преимущества:

- Автоматическое смешивание в аппарате Pentamix™ — всегда быстро и качественно смешанная и точно дозированная масса без пор и прожилок, экономия рабочего времени
- Максимальная гидрофильность. Полиэфир максимально точно воспроизводит мельчайшие детали, независимо от присутствия влаги при снятии оттиска. Полиэфир гидрофилен и в твердом состоянии, что позволяет отливать несколько моделей с каждого оттиска без потери его качества
- Повышенная текучесть способствует точному воспроизведению деталей
- Тиксотропность. Полиэфир стабилен в состоянии покоя и превосходно течёт, как только появляется давление. Масса легко вносится в ложку, шприц и на отпрепарированную область и остаётся жидкой, пока ложка давит на зубы. Но при уменьшении давления, масса становится вязкой, перестает течь
- Мгновенное схватывание по истечении рабочего времени. Масса сохраняет вязкость и текучесть в течении 2:45 мин, а затем затвердевает за несколько секунд, что минимизирует риск искажения оттиска при выведении ложки.

Инструкция по использованию:

- Предпочтительно использовать металлическую неперфорированную ложку
- Вставьте тубы с материалом в картридж и аппарат
- Заполните эластомерный шприц массой
- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 30-60 сек, 15 мин — оптимально), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в массу
- Нанесите материал из шприца на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек.



Полиэфирный монофазный оттискной материал Impregum™ Penta™ Soft
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
P31734	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
31734	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2
	1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft, 10 красных смесительных насадок Penta™, 1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными пластиковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительными дозирующими носиками (5 шт.), ершиком (1 шт.) 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров (17 мл)
	Рефилы
31794	Impregum™ Penta™ Soft
	1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл)
30600	Ложечный адгезив для полиэфиров, 1 флакон (17 мл)
	Аксессуары
P3787	1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft для аппарата Pentamix™ 3
77787	1 металлический картридж Impregum™ Penta™ Soft для аппарата Pentamix™ 2
71512	Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)
71210	1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными пласти- ковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительными дозирующими носиками (5шт.), ершиком (1 шт.)
71225	Дозирующие носики-аппликаторы для эластомерного шприца (12 шт.)

Рабочее время, включая замешивание: 2:45 мин
Время затвердевания в полости рта: 3:15 мин

Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттискных масс
Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2

Конструкции из диоксида циркония Lava™

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ / Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

Комбинация полиэфирных оттисковых масс для снятия высокоточных оттисков по одноэтапной двухфазной методике

Назначение:

- Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- Вкладка inlay/onlay/ overlay
- Штифтовые культевые вкладки
- Виниры
- Полное съемное протезирование
- Бюгельное протезирование
- Функциональные оттиски при адентии

Impregum™ Penta™ H DuoSoft™

Базовая полиэфирная масса высокой вязкости

Базовая полиэфирная масса высокой вязкости в тубах из фольги для автоматического замешивания и дозирования с помощью аппарата Pentamix™. Процедура замешивания и использования аналогична работе с оттискным материалом Impregum™ Penta™ Soft.

Impregum™ Garant™ L DuoSoft™

Корректирующая масса низкой вязкости

Корректирующая масса низкой вязкости в картриджах для замешивания, дозирования и прямого внесения в полость рта с помощью пистолета-диспенсера Garant™. Компоненты материала (база и катализатор) смешиваются в соотношении 2:1.

Преимущества:

- Автоматическое смешивание базовой массы в аппарате Pentamix™ позволяет быстро получать качественно смешанную и точно дозированную массу, а также экономить рабочее время
- Замешивание и прямое внесение корректирующей массы в полость рта с помощью пистолета — диспенсера Garant™ обеспечивает экономию времени и гигиеничность процедуры.
- Комбинация масс Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ и Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ обладает всей совокупностью преимуществ полиэфиров для получения максимально точных оттисков — гидрофильность, превосходная текучесть, тиксотропность и мгновенное схватывание по истечении рабочего времени. При этом, сочетание масс высокой и низкой вязкости позволяет снимать точный оттиск по традиционной одноэтапной двухфазной методике
- Идеально подходит для проснятия более глубоких уступов

Инструкция по использованию:

- Предпочтительно использовать металлическую неперфорированную ложку
- Вставьте тубы с материалом Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ в картридж и аппарат
- Вставьте картридж с материалом Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ в пистолет-диспенсер Garant™



Базовая полиэфирная масса высокой вязкости Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Ознакомительный набор

- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 30-60 сек, 15 мин — оптимально), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в массу.
- Нанесите материал из пистолета на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек

Артикул	Комплектация
P31738	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
31738	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 металлический картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™, 10 красных смесительных насадок Penta™, 2 картриджа Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ по 50 мл, 1 пистолет-диспенсер Garant™ 1:1/2:1, 10 белых смесительных насадок Garant™, 10 белых внутриротовых наконечников Garant™, 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров (17 мл), 1 технический гид, 1 инструкция по использованию
Рефилы	
31740	Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 2 тубы с базовой массой по 300 мл, 2 тубы с катализатором по 60 мл
31751	Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ 4 картриджа по 50 мл, 20 белых смесительных насадок Garant™
30600	Ложечный адгезив для полиэфиров, 1 флакон (17 мл)
Аксессуары	
P3793	1 металлический картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ для аппарата Pentamix™ 3
77793	1 металлический картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ для аппарата Pentamix™ 2
71512	Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)
71451	Белые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
71461N	Белые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттисковых масс Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2

Конструкции из диоксида циркония Lava™

Express™ XT Penta™ Putty

Винилполисилоксановая оттискная масса автоматического замешивания для снятия базового оттиска

А-силиконовая базовая оттискная масса очень высокой плотности для снятия оттисков по одно- и двухэтапным двухфазным техникам. Автоматически замешивается и дозируется с помощью аппарата Pentamix™

Назначение:

- Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- Вкладка inlay/onlay/ overlay
- Штифтовые культевые вкладки

Преимущества:

- Всегда качественно замешанная в аппарате Pentamix™ масса очень высокой плотности, в точной пропорции, с неизменным рабочим временем и скоростью затвердевания
- Удобное и аккуратное заполнение ложки непосредственно из аппарата
- Привычная консистенция, как у традиционных базовых масс ручного замешивания: легко распределяется по ложке и моделируется
- Гидрофильный и текучий материал
- Без вкуса и запаха
- Укороченное время затвердевания в полости рта
- Благодаря высокой конечной твердости в оттиске легко вырезаются отводные каналы
- Пространственная стабильность, высокая прочность на разрыв, память формы
- Уже в базовом оттиске точно воспроизведены детали
- Может комбинироваться с любой а-силиконовой корригирующей массой. Максимально точные оттиски получаются в сочетании с массами Express™ XT
- Высокое давление, создаваемое базовым оттиском, позволяет корригирующей массе точно и глубоко проникать в зубодесневую борозду
- Возможность длительного хранения оттиска и повторной отливки модели

Инструкция по использованию - на стр. 37



Винилполисилоксановая оттискная масса Express™ XT Penta™ Putty
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
P36998	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 3
36998	Ознакомительный набор для аппарата Pentamix™ 2 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty, 10 красных смесительных насадок Penta™, 1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body - картриджи по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок Garant™, 10 желтых внутриротовых наконечников Garant™, 1 флакон с ложечным адгезивом для А-силиконов (17 мл), технический гид, инструкция по использованию
Рефилы	
36895	Express™ XT Penta™ Putty 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), инструкция по применению
7307	Ложечный адгезив для А-силиконов, 1 флакон (17 мл)
Аксессуары	
P3982	1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty для аппарата Pentamix™ 3
36982	1 металлический картридж Express™ XT Penta™ Putty для аппарата Pentamix™ 2
71512	Красные смесительные насадки Penta™ (50 шт.)
77580	Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1 (для корригирующей массы Express™ XT)
71452	Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
71462	Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Сопутствующие продукты: Аппарат для смешивания оттискных масс Pentamix™ 3 и Pentamix™ 2

Корригирующая оттискная масса Express™ XT
Конструкции из диоксида циркония Lava™

Express™ XT

Винилполисилоксановые корректирующие оттисковые массы

А-силиконовые корректирующие оттисковые массы с разной степенью вязкости и временем затвердевания в картриджах для пистолета – диспенсера Garant™

Назначение:

- Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- Вкладка inlay/onlay/ overlay
- Штифтовые культевые вкладки

Преимущества:

- Оптимальный баланс клинически важных свойств
- Тиксотропность
- Повышенная гидрофильность и превосходная текучесть
- Эластичность в сочетании с очень высокой прочностью на разрыв – для извлечения оттиска без отрывов и оттяжек материала
- Почти 100% восстановление формы после растяжения, что практически исключает риск искажения оттиска
- Высокая пространственная стабильность
- Благодаря отсутствию усадки модель можно многократно отливать в любой момент в течение 2 недель
- Удобно и легко замешивается и дозируется с помощью пистолета-диспенсера Garant™

Инструкция по использованию масс Express™ XT:

- Вставьте тубы с материалом Express™ XT Penta™ Putty в картридж и аппарат
- Вставьте картридж с корректирующим материалом Express™ XT в пистолет-диспенсер Garant™

Одноэтапная техника

- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в массу
- Нанесите корректирующий материал из пистолета Garant™ на отпрепарированную область, медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания (3 мин)
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек



Винилполисилоксановая корректирующая оттисковая масса Express™ XT Light Body

Артикул	Комплектация
36974	Express™ XT Light Body 2 картриджа по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок Garant™, инструкция по применению
36976	Express™ XT Light Body Quick 2 картриджа по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок Garant™, инструкция по применению
36975	Express™ XT Regular Body 2 картриджа по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок Garant™, инструкция по применению
36799	Express™ Ultra-Light Body 4 картриджа (по 50 мл), 20 желтых смесительных насадок Garant™
Аксессуары	
77580	Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1 (для корректирующей массы Express™ XT)
71452	Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
71462	Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Двухэтапная техника

- Заполните оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом (время высыхания 5-15 мин), удерживая смесительный наконечник аппарата погруженным в массу
- Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 3 мин, произведите очистку и просушите его
- Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и, при необходимости, сделайте отводные каналы
- Нанесите корректирующий оттисковый материал из пистолета Garant™ на полученный базовый оттиск на соответствующую сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания корректирующего материала
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек

Express™ XT Putty Soft

Винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания для снятия базового оттиска

А-силиконовая базовая оттискная масса ручного замешивания для одно-двухэтапной двухфазной техники снятия оттиска

Назначение:

- Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- Вкладка inlay/onlay/ overlay
- Штифтовые культевые вкладыши
- Силиконовый ключ

Преимущества:

- Улучшенная консистенция облегчает процедуру замешивания
- Высокая гидрофильность обеспечивает точное воспроизведение деталей
- Отличная пространственная стабильность, память формы
- Длительное время хранения оттиска, возможность повторной отливки моделей
- Высокая прочность на разрыв
- Высокая вязкость, а, следовательно, высокое давление материала при введении оттискной ложки, обеспечивающее идеальное проникновение корректирующей массы в десневую борозду и проснятые границы препарирования
- Возможна комбинация с любой а-силиконовой корректирующей массой Express™ XT

Одноэтапная техника

- Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более 30 секунд. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками.
- Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительным нанесением ложечным адгезивом
- Нанесите корректирующий материал из пистолета Garant™ на отпрепарированную область, медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 3:30 мин
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек.



Винилполисилоксановая оттискная масса Express™ XT Putty Soft
Ознакомительный набор

Двухэтапная техника

- Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более 30 секунд. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками.
- Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительным нанесением ложечным адгезивом
- Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 3:30 мин, произведите очистку и просушите его
- Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и сделайте отводные каналы при необходимости
- Нанесите корректирующий оттискной материал из пистолета Garant™ на полученный базовый оттиск на соответствующую сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания корректирующего материала
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек.

Артикул	Комплектация
36996	Express™ XT Putty Soft Ознакомительный набор 2 банки с массой для базового слоя (по 250 мл), 1 картридж с корректирующей массой Express™ XT Light Body (50 мл), 1 картридж с корректирующей массой Express™ XT Regular Body (50 мл), 1 флакон ложечного адгезива для А-силиконов (17 мл), 2 ложки для базовой массы, 10 желтых смешивательных насадок Garant™, 10 желтых внутриротовых наконечников Garant™
Аксессуары	
77580	Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1 (для корректирующей массы Express™ XT)
71452	Желтые смешивательные насадки Garant™ (50 шт.)
71462	Желтые внутриротовые насадки Garant™ (50 шт.)

РЕФИЛ
скоро в продаже

Express™

Винилполисилоксановая оттискная масса ручного замешивания для снятия базового оттиска

А-силиконовая базовая оттискная масса ручного замешивания для работы по одно- и двухэтапной двухфазной технике снятия оттисков

Назначение:

- Непротяженные мостовидные конструкции (до 3 единиц)
- Протяженные мостовидные конструкции (4 единицы и более)
- Вкладка inlay/onlay/ overlay
- Штифтовые культевые вкладки
- Силиконовый ключ

Преимущества:

- Масса легко замешивается
- Тиксотропность и гидрофильность обеспечивают удобство в работе
- Возможна комбинация с любой а-силиконовой корректирующей массой. Идеальное сочетание – с гидрофильными и тиксотропными корректирующими массами Express™ XT в двухэтапной технике
- Высокая точность отображения деталей
- Отличная пространственная стабильность, память формы
- Высокая прочность на разрыв
- Длительное время хранения оттиска, возможность повторной отливки моделей
- Без вкуса и запаха

Одноэтапная техника

- Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более 30 сек. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками
- Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
- Нанесите корректирующий материал из пистолета Garant™ на отпрепарированную область, медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 5 мин
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек



Винилполисилоксановая оттискная масса Express™ STD

Двухэтапная техника

- Отмерьте равные объемы базовой массы и катализатора и смешайте их до получения однородного цвета в течение не более 30 сек. Внимание: не пользуйтесь латексными перчатками
- Внесите смешанную массу в оттискную ложку с предварительно нанесенным ложечным адгезивом
- Медленно введите оттискную ложку в полость рта и удерживайте ее, не прилагая давления
- Удалите оттиск из полости рта через 5 мин, произведите очистку и просушите его
- Вырежьте поднутрения, межзубные перегородки и т.д. и сделайте отводные каналы при необходимости
- Нанесите корректирующий оттискный материал из пистолета Garant™ на полученный оттиск на соответствующую сторону и/или на отпрепарированную область и введите оттискную ложку в полость рта
- Удалите оттиск из полости рта по прошествии времени затвердевания
- Удалите излишки материала из полости рта, поместите оттиск в дезинфицирующий раствор на 10 мин, после чего промойте оттиск водой в течение 15 сек

Артикул	Комплектация
	Рефилы
7312	Масса Express™ для базового слоя 2 банки по 305 мл
7307	Ложечный адгезив для А-силиконов, 1 флакон (17 мл)
	Аксессуары
77580	Пистолет-диспенсер Garant 1:1/2:1 (для корректирующей массы Express™ XT)
71452	Желтые смесительные насадки Garant™ (50 шт.)
71462	Желтые внутриротовые наконечники Garant™ (50 шт.)

Сопутствующие продукты: Корректирующие оттискные массы Express™ XT



Цементы для фиксации, стекловолоконные штифты

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент RelyX™ U100	42
Стекловолоконные штифты RelyX™ Fiber Post	43
Адгезивный композитный цемент RelyX™ ARC.....	44
Гибридный стеклоиономерный цемент RelyX™ Luting 2	45
Гибридный стеклоиономерный цемент RelyX™ Luting	46
Стеклоиономерный цемент Ketac™ Cem Easymix.....	47
Цемент для временной фиксации RelyX™ Temp NE	48
Керамический праймер RelyX™	49



Цементы для фиксации ортопедических конструкций

	Ketac™ Cem Easymix	RelyX™ Luting	RelyX™ Luting 2	RelyX™ ARC	RelyX™ U100	RelyX™ Temp NE
Тип цемента	Стеклоиономерный	Гибридный стеклоиономерный	Гибридный стеклоиономерный	Адгезивный композитный	Универсальный самоадгезивный	На основе оксида цинка, без эвгенола
Фиксация	Постоянная	Постоянная	Постоянная	Постоянная	Постоянная	Временная
Форма	Гранулированный порошок / Жидкость	Порошок / Жидкость	Паста / Паста в дозирующей системе Clicker™	Паста / Паста в дозирующей системе Clicker™	Паста / Паста в дозирующей системе Clicker™	Паста / Паста
Показания						
Конструкции из металла/металлокерамики						
Вкладки / накладки	●	●	●	○	●	●
Коронки	●	●	●	○	●	●
Мосты	●	●	●	○	●	●
Эндодонтические штифты	●	●	●	○	●	✗
Мосты "Мэриленд"	✗	✗	✗	●	●	✗
Цельнокерамические конструкции						
Коронки	✗	✗	✗	●	●	●
Мосты	✗	✗	✗	●	●	●
Вкладки / накладки	✗	✗	✗	●	●	●
Усиленные коронки и мосты (на основе оксида циркония/ алюминия)	○	○	○	●	●	●
Конструкции из композита						
Коронки	✗	✗	✗	●	●	●
Вкладки / накладки	✗	✗	✗	●	●	●
Виниры				●		
Временные коронки и мосты	✗	✗	✗	✗	✗	●

- - Рекомендован / Прямое назначение
○ - Может использоваться / Непрямое назначение
✗ - Не рекомендуется / Применение невозможно

	Ketac™ Cem Easymix	RelyX™ Luting	RelyX™ Luting 2	RelyX™ ARC	RelyX™ U100	RelyX™ Temp NE
Свойства						
Необходимость применения кондиционера	Не требуется	Не требуется	Не требуется	—	—	—
Необходимость протравливания, применения адгезива	—	—	—	Обязательно	—	—
Рентгеноконтрастность	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Фторовыделение	Максимальное	Активное	Активное	Отсутствует	Отсутствует	—
Сила адгезии	Высокая	Очень высокая	Очень высокая	Максимальная	Максимальная	—
Толщина плёнки, мкм	17 ± 2	17 ± 2,6	15,3 ± 1,5	12 ± 0,5	12 ± 0,5	2
Количество оттенков	1	1	1	2 (A1, A3)	3 (прозрачный, A2, A3)	1
Отверждение	Химическое	Химическое	Химическое	Световое / химическое	Световое / химическое	Химическое
Время замешивания *, сек	30	30	20	10	20	30
Рабочее время (включая замешивание), мин**	3:10	2:30	2:30	2:00	2:00	2:30
Время окончательного отверждения в полости рта, мин	3:30	5:00	5:00	40 сек / 8:00 **	20 сек / 3:00	1:00

* - При комнатной температуре 18-23°C и относительной влажности 45%-55%

** - Время светового / химического отверждения

Ketac™ Cem Easymix

Стеклоиономерный цемент для фиксации

Ketac™ Cem Easymix совмещает в себе все преимущества классического стеклоиономерного цемента и удобной гранулированной формы порошка, которая улучшает смачиваемость, позволяет быстрее производить замес и практически не создаёт пыли

Назначение:

- Постоянная фиксация вкладок, накладок, коронок, мостовидных протезов из металла и металлокерамики
- Постоянная фиксация анкерных и парапальпарных штифтов
- Пломбирование при кариесе корня
- Надстройка культи
- Построение основы при сэндвич-технике
- Обтурация канала при операции резекции верхушки корня
- Закрытие перфорационных дефектов

Преимущества:

- 25-летний документированный клинический мировой опыт использования
- Удобная форма – гранулированный порошок: более быстрый замес, точное дозирование, возможность получения замеса нужной консистенции, минимум пыли
- Химическая адгезия к тканям зуба: не требуется абсолютная сухость поверхности, протравливание или бондинг
- Биосовместим с тканями зуба, не токсичен
- Пролонгированное выделение фтора
- Высокая компрессионная прочность и износостойчивость: длительный срок службы конструкции
- Широкий спектр применения
- Рентгеноконтрастность

Инструкция по использованию:

- Замешайте порошок-жидкость в соотношении 1 ложка порошка – 2 капли жидкости (при формировании культи можно добавить порошок до необходимой консистенции) в течение 30 сек
- Разотрите пасту до образования гомогенной смеси
- Внесите цемент тонким слоем в конструкцию
- Удалите излишки цемента через 6-8 мин после начала смешивания

Рабочее время, включая замешивание: 3:10 мин

Время окончательного отверждения в полости рта: 3:30 мин



Цемент для фиксации Ketac™ Cem Easymix
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
56906	Тройная упаковка 3 флакона с порошком (30 г) 3 флакона с жидкостью (12 мл) 3 пипетки 1 мерная ложка 1 блокнот для замешивания
56900	Ознакомительный набор 1 флакон с порошком (30 г) 1 флакон с жидкостью (12 мл) 1 блокнот для замешивания

Жидкость для холодного силанирования / керамический адгезив

- Силанирование конструкций из керамики или металлов перед цементировкой
- Силанирование конструкций из керамики или металлов при их починке
- Быстрый ремонт металлокерамики и безметалловой керамики

- Холодное силанирование керамики и металлов
- Простота использования
- Отличные показатели адгезии, в т.ч. к золотосодержащим сплавам

- Нанести праймер на загрублённую, протравленную керамическую поверхность
- Нанести адгезив Adper™ Single Bond 2 и фотополимеризовать в течение 10 сек



Керамический праймер RelyX™

Артикул	Комплектация
2721P	1 керамический праймер (5 мл)



Временные ортопедические конструкции

Композитный материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4	51
Преформованные комозитные коронки для временного протезирования Protemp™ Crown	52
Временные поликарбонатные коронки	53
Коронки из нержавеющей стали	54

Protemp™ 4

Композитный материал для изготовления временных конструкций

Композитный материал для изготовления временных ортопедических конструкций в картриджах для пистолета-диспенсера Garant™

Назначение:

- Изготовление временных коронок, мостов, вкладок, накладок, виниров прямым способом
- Показан для долгосрочного временного протезирования

Преимущества:

- Не требует полирования и постбондинга
- Наивысшие прочностные характеристики
- Высочайшая эстетика реставраций. Стойкий блеск и флюоресценция, идеально совпадающая с флюоресценцией натуральных зубов
- Высокий уровень цветостабильности из-за сниженной толщины ингибированного слоя
- Отличное краевое прилегание
- Легко моделируется
- Форма конструкции легко корректируется текучим композитом
- 5 оттенков, идеально соответствующих цветам жидкотекучего композита Filtek™ Ultimate
- Безопасен для пациента и не вызывает дискомфорт. Не выделяет мономеров и не перегревает зубы
- Простота в применении. Благодаря системе Garant™ процедура замешивания и дозирования материала максимально проста. Материал удобно вносить в оттиск из смешивающего носика

Инструкция по использованию:

- Заполнение слепка материалом и размещение в полости рта до 40 сек
- Затвердевание в полости рта от 40 сек до 1:40 мин
- Удаление из полости рта от 1:40 мин до 2:50 мин
- Полное затвердевание от 2:50 мин до 5:00 мин
- Шлифование после 5:00 мин
- Окончательная обработка



Композитный материал для изготовления временных конструкций Protemp™ 4
Ознакомительный набор

Артикул	Комплектация
46953	Ознакомительный набор 1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A2 16 голубых смешительных наконечников 1 пистолет-диспенсер Garant™ 10:1
	Рефилы
46959	1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок Bleach (отбеленные зубы) 16 голубых смешительных наконечников для пистолета-диспенсера Garant™
46954	1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A1 16 голубых смешительных наконечников для пистолета-диспенсера Garant™
46956	1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A2 16 голубых смешительных наконечников для пистолета-диспенсера Garant™
46957	1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок A3 16 голубых смешительных наконечников для пистолета-диспенсера Garant™
46960	1 картридж Protemp™ 4 (50мл), оттенок B3 16 голубых смешительных наконечников для пистолета-диспенсера Garant™
	Аксессуары
71453	Смешительные наконечники (голубые) для пистолета-диспенсера Garant™ (50 шт.)
77581	Пистолет-диспенсер Garant™ 10:1



Местные анестетики

Местный анестетик Ubistesin™	57
Местный анестетик Ubistesin™ forte	58
Местный анестетик Мепивастесин™	59

Ubistesin™

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии

Местный анестетик широкого спектра действия

Назначение:

- Инфильтрационная анестезия перед препарированием зубов
- Инфильтрационная анестезия перед экстракцией зубов
- Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
- Проводниковая анестезия перед экстракцией зубов
- Инфильтрационная и проводниковая анестезия перед проведением оперативных вмешательств на околочелюстных мягких тканях

Состав:

- Артикаин, 4%-ный раствор
- Адреналин (Epinephrin) 1:200 000

Преимущества:

- Обеспечивает эффективное по глубине и продолжительности обезболивание
- Содержит только безопасные ингредиенты: адреналин в качестве вазоконстриктора и только сульфиты (макс. 0.31 мг) в качестве стабилизатора
- Не содержит парабенов
- Не содержит ЭДТА
- Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
- Металлическая формованная банка надежно защищает карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
- Специальная лента на каждой карпуле защищает их от растрескивания и других повреждений, что делает Убистезин идеальным анестетиком для интралигаментарной анестезии
- Полиуретановая прокладка по всей внутренней поверхности банки улучшает термоизолирующие свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и охлаждается при транспортировке
- Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат дополнительную защиту от инактивации адреналина – сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум – гарантия того, что продукт был упакован в заводских условиях
- Подходит для проведения аспирационной пробы

Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться при температуре не выше 25°C в защищенном от солнечных лучей месте.



Раствор Ubistesin™
Упаковка с 50 карпулами

Инструкция по использованию:

- Наступление анестезии – 1–3:00 мин с момента введения
- Длительность обезболивания – 45 мин
- Рекомендованная максимальная доза: 7 мг/кг веса (500 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента, что соответствует 12,5 мл Убистезина 1:200 000 (7 карпул)
- При проведении обезболивания на фоне обострившегося одонтогенного воспалительного процесса доза вводимого анестетика и выбор метода обезболивания требуют корректировки
- Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Артикул	Комплектация
15091	1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая 50 карпул по 1,7 мл

Ubistesin™ forte

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии

Местный анестетик для терапевтической и хирургической стоматологии, а также для хирургии

Назначение:

- Инфильтрационная анестезия перед препарированием зубов
- Инфильтрационная анестезия перед экстракцией зубов
- Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
- Проводниковая анестезия перед экстракцией зубов
- Инфильтрационная и проводниковая анестезия перед проведением оперативных вмешательств на слизистой оболочке полости рта
- Вмешательства на альвеолярном отростке и других костях лицевого скелета
- Операции на окологлазничных мягких тканях
- Операции остеотомии и компактоостеотомии
- Имплантология
- Операции цистотомии и цистэктомии
- Операции резекции верхушки корня
- Операции при ретенции и дистопии
- Выполнение блокад

Состав:

- Артикаин, 4%-ный раствор
- Адреналин (Epinephrin) 1:100 000

Преимущества:

- Обеспечивает эффективное по глубине и продолжительности обезболивание
- Содержит только безопасные ингредиенты: адреналин в качестве вазоконстриктора и только сульфиты (макс. 0.31 мг) в качестве стабилизатора
- Не содержит парабенов
- Не содержит ЭДТА
- Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
- Металлическая формованная банка надежно защищает карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
- Специальная лента на каждой карпуле защищает их от растрескивания и других повреждений, что делает Убистезин идеальным анестетиком для интралигаментарной анестезии
- Полиуретановая прокладка по всей внутренней поверхности банки улучшает термоизолирующие свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и охлаждается при транспортировке



Раствор Ubistesin™ forte
Упаковка с 50 карпулами

- Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат дополнительную защиту от инактивации адреналина – сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум – гарантия того, что продукт был упакован в заводских условиях
- Подходит для проведения аспирационной пробы

Инструкция по использованию:

- Наступление анестезии – 1–3:00 мин с момента введения
- Длительность обезболивания – 75 мин
- Рекомендованная максимальная доза: 7 мг/кг веса (500 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента, что соответствует 12,5 мл Убистезина Форте 1:100 000 (7 карпул)
- При проведении обезболивания на фоне обострившегося одонтогенного воспалительного процесса доза вводимого анестетика и выбор метода обезболивания требуют корректировки
- Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться при температуре не выше 25°C в защищенном от солнечных лучей месте.

Артикул	Комплектация
15201	1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая 50 карпул по 1,7 мл

Mepivastesin™

Раствор для инфильтрационной и проводниковой анестезии

Местный анестетик для стоматологии для пациентов с сердечно-сосудистой патологией и артериальной гипертензией

Назначение:

- Инфильтрационная анестезия перед препарированием зубов
- Проводниковая анестезия перед препарированием зубов
- Анестезия перед экстракцией одного зуба

Состав:

- Мепивакаин, 3%-ный раствор

Преимущества:

- Содержит только 3%-ный мепивакаин в качестве единственного активного компонента
- Не содержит адреналина в качестве вазоконстриктора и сульфитов в качестве стабилизатора
- Не содержит парабенов
- Не содержит ЭДТА
- Обеспечивает достаточное по глубине и продолжительности обезболивание для выполнения небольшого вмешательства
- Подходит для взрослых и детей старше 4х лет
- Металлическая формованная банка надежно защищает карпулы от повреждения при транспортировке и хранении
- Специальная лента на каждой карпуле защищает их от растрескивания и других повреждений, что делает Мепивастезин идеальным анестетиком для интралигаментарной анестезии
- Полиуретановая прокладка по всей внутренней поверхности банки улучшает термоизолирующие свойства упаковки – анестетик медленнее нагревается и охлаждается при транспортировке
- Только упаковки анестетиков 3M ESPE содержат дополнительную защиту от инактивации адреналина – сорбент кислорода. В закрытой банке всегда вакуум – гарантия того, что продукт был упакован в заводских условиях
- Подходит для проведения аспирационной пробы

Инструкция по использованию:


- Наступление анестезии – 1-3:00 мин с момента введения
- Длительность обезболивания – 20-40 мин
- Рекомендованная максимальная доза: 4 мг/кг веса (300 мг на 70 кг веса) для взрослого здорового пациента, что соответствует 10 мл Мепивастезина (5,5 карпул)
- Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Раствор Mepivastesin™
Упаковка с 50 карпулами

Внимание! Карпулированные анестетики должны храниться при температуре не выше 25°C в защищенном от солнечных лучей месте.

Артикул	Комплектация
13014	1 жестяная банка с пластиковой крышкой, содержащая 50 карпул по 1,7мл

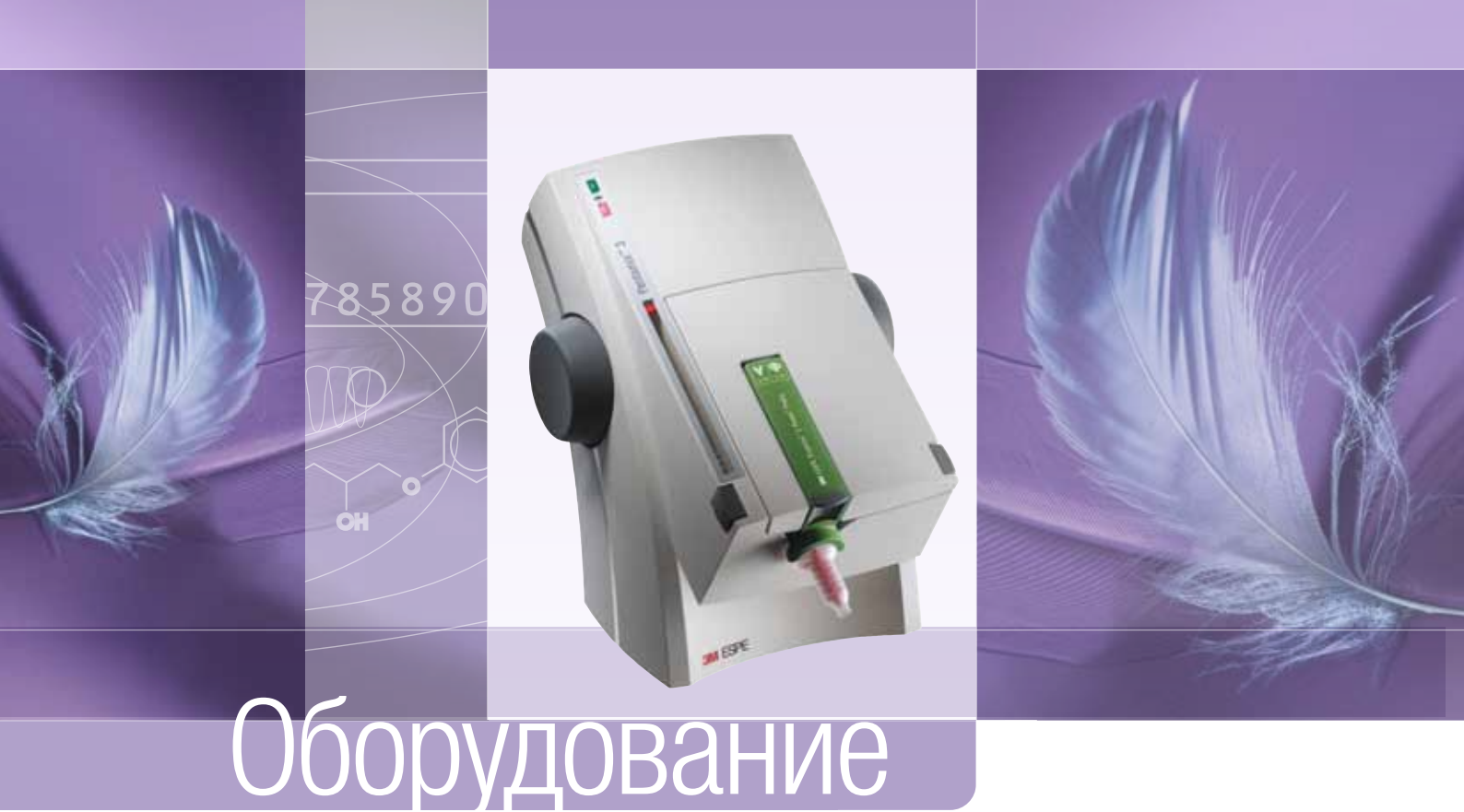

Оборудование

Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс Pentamix™ 3	61
Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс Pentamix™ 2	62
Устройство для полимеризации Elipar™ S10	63

Pentamix™ 3

Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс



Назначение:

Автоматическое смешивание оттисковых масс Penta™ компании 3M ESPE, в том числе масс высокой плотности для снятия базового оттиска.

Преимущества:

- Качественное смешивание массы до полностью гомогенного состояния без пор и прожилок
- Экономия материала с помощью точного дозирования массы
- Экономия времени – самая высокая скорость смешивания масс среди аналогичных аппаратов для автоматического смешивания оттисковых масс и в два раза выше скорости смешивания аппарата Pentamix™ 2
- Удобное наполнение ложки прямо из аппарата
- Гигиеничность процедуры смешивания
- Подходит для смешивания полиэфирных и а-силиконовых оттисковых масс
- Идеально подходит для работы с быстрозатвердевающими материалами
- Эргономичный дизайн и компактные размеры
- Наличие двух кнопок для включения аппарата – слева и справа
- Не требуется открытия крышки аппарата для смены смешивающих насадок, а также для контроля расходования материала
- Возможность крепления на вертикальные поверхности

Техническая спецификация:

- Скорость смешивания > 150 мл/мин
- Вес: 9,8 кг
- Размер: длина – 283 мм, ширина – 225 мм, высота – 280 мм
- Напряжение: 100 – 240 В

Артикул	Комплектация
77871	Аппарат для смешивания оттисковых масс Pentamix™ 3
77601	Устройство для крепления аппарата Pentamix™ 3 на стене
71512	50 красных смешительных насадок Penta™
77780	Плунжерные диски для аппарата Pentamix™
71210	Эластомерный шприц Penta™ в комплекте 1 эластомерный шприц Penta™ с 3-мя дополнительными пластиковыми цилиндрами и дозирующими носиками



reddot design award
winner 2009

* В 2009 году аппарат Pentamix™ 3 был удостоен престижной премии в области дизайна reddot design award в номинации "Дизайн продукта".

* В 2009 году журнал The Dental Advisor назвал аппарат Pentamix™ 3 "Выбором ассистента" (Assistant's choice)



Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс Pentamix™ 3

Артикул	Комплектация
Наборы оттисковых масс для аппарата Pentamix™ 3	
P31734	Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ Soft 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 картридж Impregum™ Penta™ Soft, 10 красных смешительных насадок Penta™, 1 эластомерный дозатор Penta™ с дополнительными пластиковыми цилиндрами (4 шт.), дополнительными дозирующими носиками (5 шт.), ершиком (1 шт.)
P31738	Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ H DuoSoft™ 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™, 10 красных смешительных насадок Penta™, 2 картриджа Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ по 50 мл, 1 диспенсер Garant™ 1:1/2:1, 10 белых смешительных насадок Garant™, 10 белых внутритротовых наконечников Garant™, 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров 17 мл, 1 технический гид, 1 инструкция по применению
P36998	Ознакомительный набор Express™ XT Penta™ Putty 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 картридж Express™ XT Penta™ Putty, 10 смешительных насадок Penta™, 1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body - картриджи по 50 мл, 10 желтых смешительных насадок Garant™, 10 желтых внутритротовых наконечников Garant™, 1 ложечный адгезив для А-силиконов, 1 технический гид, 1 инструкция по применению

Сопутствующие продукты: Оттисковые материалы
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Impregum™ Penta™ Soft™

Express™ XT Penta™ Putty

Pentamix™ 2

Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс

Надежное качество, доказанное
более, чем десятилетним опытом!

Назначение:

Автоматическое смешивание оттисковых масс Penta™ компании 3M ESPE, в том числе масс высокой плотности для снятия базового оттиска.

Преимущества

- Смешивание массы до полностью гомогенного состояния без пор и прожилок
- Экономия материала с помощью точного дозирования массы и незначительного количества излишка, остающегося в смесительной насадке – на 30% меньше, чем при ручном смешивании*
- Постоянное качество массы благодаря смешиванию базы и катализатора в точной пропорции
- Гигиеничность процедуры смешивания
- Подходит для смешивания полиэфирных и α-силиконовых оттисковых масс
- Удобное наполнение ложки и эластомерного шприца прямо из аппарата
- Контроль расходования материала без открытия крышки
- Возможность крепления на вертикальные поверхности

* Внутренние данные компании 3M ESPE

Техническая спецификация:

Скорость смешивания > 75 мл/мин

Вес: 10,1 кг

Размер: длина – 370 мм, ширина – 240 мм, высота – 307 мм

Напряжение: 120 – 230 В



Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс Pentamix™ 2

Артикул	Комплектация
77959	Аппарат для смешивания оттисковых масс Pentamix™ 2
77600	Устройство для крепления аппарата Pentamix™ 2 на стене
71512	50 красных смесительных насадок Penta™
77780	Плунжерные диски для аппарата Pentamix™
71210	Эластомерный шприц Penta™ в комплекте 1 эластомерный шприц Penta™ с 3-мя дополнительными пластиковыми цилиндрами и дозирующими носиками
Наборы оттисковых масс для аппарата Pentamix™ 2	
31734	Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ Soft 1 туба с базовой массой (300 мл), 1 туба с катализатором (60 мл), 1 картридж Impregum™ Penta™ Soft, 10 красных смесительных насадок Penta™, 1 эластомерный шприц Penta™, канюли-аппликаторы для шприца, 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров

Артикул	Комплектация
31738	Ознакомительный набор Impregum™ Penta™ H DuoSoft 1 базовая паста 300 мл, 1 катализатор 60 мл, 1 картридж Impregum™ Penta™ H DuoSoft™, 10 красных смесительных насадок Penta, 2 картриджа Garant™ по 50 мл, 1 диспенсер Garant™ 1:1/2:1, 10 белых смесительных насадок Garant™, 10 белых внутритротовых наконечников Garant™, 1 флакон с ложечным адгезивом для полиэфиров 17 мл, 1 технический гид, 1 инструкция по применению
36998	Ознакомительный набор Express™ XT Penta™ Putty 1 базовая паста 300 мл, 1 катализатор 60 мл, 1 картридж Express™ XT Penta™ Putty, 10 смесительных насадок Penta™, 1 Express™ XT Light Body и 1 Express™ XT Regular Body картриджи по 50 мл, 10 желтых смесительных насадок Garant™, 10 желтых внутритротовых наконечников Garant™, 1 ложечный адгезив для А-силиконов, технический гид, инструкция по применению
Картриджи	
77787	Картридж металлический для оттисковой массы Impregum™ Penta™ Soft
77793	Картридж металлический для оттисковой массы Impregum™ Penta™ H DuoSoft
36982	Картридж металлический для оттисковой массы Express™ XT Penta™ Putty

Сопутствующие продукты: Оттисковые материалы
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™
Impregum™ Penta™ Soft™

Express™ XT Penta™ Putty

Elipar™ S10

Устройство для световой полимеризации

Назначение:

Полимеризация светоотверждаемых стоматологических материалов

Преимущества:

- Литой корпус из нержавеющей стали – не бьется и очень легко дезинфицировать
- Уникальная эргономичная форма ручки – удобный захват под любым углом
- Полимеризует за один прием с большей мощностью (до 50%) и большую поверхность (до 80%)
- Более быстрая и глубокая светополмеризация
- Простое управление всего двумя кнопками
- Бесшумная работа – инновационный дизайн подавляет шум от работы, возможно отключение звуковых сигналов

Техническая спецификация:

- Длина волны излучения: 430 – 480 нм
- Мощность излучения: 1200 мВт/см² +10% (в независимости от остаточного заряда батареи)
- Источник питания: Литий ионная батарея (гарантия 1 год)
- Полный заряд батареи обеспечивает 60 мин работы в режиме непрерывной полимеризации
- Зарядка батареи примерно за 90 мин
- Легкая замена батареи
- Настройки таймера: 5, 10, 15, 20 сек, продолженный режим (120 сек) и режим предварительной полимеризации



Светополмеризационное устройство Elipar™ S10

Артикул	Комплектация
76951	1 Elipar S10 устройство для световой полимеризации
Аксессуары	
76958	1 Elipar S10 световод прозрачный 10 мм
76957	1 Elipar S10 защитный светофильтр
76956	1 Elipar S10 элемент питания



reddot design award
winner 2010

* Светодиодная лампа Elipar™ S10 - победитель престижной премии в области дизайна reddot award 2010 в номинации "Дизайн продукта"

Диоксид циркония Lava™



Диоксид циркония Lava™ — гарантия качества и долговечности

Гарантия на каркасы Lava™, заказанные в авторизованных фрезерных и дизайн-центрах Lava™ в России, составляет 15 лет!

Уникальный идентификационный код каждой реставрации позволяет проверить подлинность диоксида циркония, из которого изготовлен каркас.



Фрезерные центры:

ООО "Сервис Плюс"
г. Москва, Волгоградский пр-т, 8
Тел.: (495) 911-00-20,
(495) 912-38-38
info@lavacenter.ru

ООО "Мегадента Клиник"
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9
Тел.: (343) 388-09-09
clinic@megadenta.ru

Дизайн-центры:

ООО "Мастер Кит"
454080, г. Челябинск,
ул. Сони Кривой, 67-А
Тел.: (351) 734-000-4
info@belkit.ru

ООО "Дентал-Сервис"
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 4
Тел.: (383) 332-66-55, 332-80-00

ООО "Дент-Лайн" 394030, г.
Воронеж, ул. Революции 1905
года, дом 11-А.
Тел.: (4732) 39-20-90, 71-83-05

ООО "Зуботехническая
стоматология"
г. Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 13
тел.: (831) 212-50-30

ООО "Зуботехнический центр
Неодент"
г. Санкт-Петербург,
пр. Металлистов, 58
Тел.: (812) 321-62-01

Зуботехническая лаборатория
"Артис" г. Москва,
Щелковское шоссе, дом 100,
корп. 6, офис 118
тел. (495) 641 43 42,
(495) 972 70 47, (901) 501 15 75

Более подробная информация представлена на сайте www.3Mespe.ru

3M ESPE

Вы + 3M ESPE =

Формула успеха

3M ESPE

Материалы для стоматологии

3M Россия

Центральный офис и Технологический Центр

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3mespe.ru

Клиентский центр

192029, Россия, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 2, лит. А
Бизнес-Центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр

620142, Екатеринбург
ул. Большакова, д. 70
Бизнес-центр «Корин», 6 эт.
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, ESPE, Filtek, Adper, Ketac, Sof-Lex, Protemp, L-Pop, Lava, Ubistesin, Mepivastin, Express, Impregum, Clicker, Garant, Vitremer, Vitrebond, Scotchbond, RelyX, Valux, Pentamix являются зарегистрированными товарными знаками компании 3M или 3M Deutschland GmbH.

© 3M 2012. Все права защищены.